



CareMat® Sensormatten

Das Original: die unverzichtbare Hilfe für sturzgefährdete Personen in neuem Design, mit noch mehr Vorteilen und **3 Jahren Garantie!**

Unsere **CareMat® Sensormatten** bieten seit Jahren in zahlreichen Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie im privaten Pflegeeinsatz zuverlässig Unterstützung bei der Sturzprävention bettlägeriger Pflegebedürftiger jeden Alters.

Mittlerweile gibt es die bestens bewährte Sturzmatte in drei verschiedenen Ausführungen – ganz nach Bedarf und Vorliebe:

A01E CareMat® Sturzmatte – die Klassische

Wird bevorzugt in Krankenhäusern eingesetzt, da sie den gesamten Ausstiegsbereich des Bettes abdeckt.

C01E CareMat® Sturzmatte – die Formschöne

Passt optisch durch ihre ansprechende ovale Form gut in jedes Wohn-Pflegezimmer und ist aufgrund der drei praktischen Griffe leicht zu platzieren.

B01E CareMat® Sturzmatte – die Vielseitige

Diese kleine Sturzmatte wird auch gerne zur Türenabsicherung eingesetzt.



Die CareMat® Vorteile im Überblick:

- 👍 ➡ kein Kabelsalat, da **Funkausführung**
- 👍 ➡ Lieferung einsatzbereit mit **Anschluss an den Schwesternruf**
- 👍 ➡ in der **Hauskrankenpflege** einsetzbar mittels **Funkgong**
- 👍 ➡ **rutschfeste Oberfläche** durch Noppenstruktur
- 👍 ➡ abgeschrägte, **Rollstuhl-gängige Kanten**
- 👍 ➡ einfach zu reinigendes Polyurethan, für die **Krankenhaus-Hygiene** geeignet
- 👍 ➡ praktische **Tragegriffe** zur einfachen Handhabung
- 👍 ➡ robuste, langlebige und **wartungsfreie** Bauweise
- 👍 ➡ sowohl als **Bettflucht** als auch zur **Türenabsicherung** geeignet
- 👍 ➡ einfach **auswechselbare Funksender-Batterie** mit sehr langer Lebensdauer
- 👍 ➡ Qualität **Made in Switzerland mit 3 Jahren Garantie!**
- 👍 ➡ **CE-Kennzeichen** gemäß EMV-Richtlinie 2004/108/EG



CareMat® Sensormatten

Die **CareMat®** soll an einen **Schwesternruf Modell** _____
angeschaltet werden.

☐ Das Rufanlagen-Informationsblatt liegt bei* / liegt bereits vor*

Für Rückfragen erreichen Sie mich hier:

Haus: _____

Name: _____

Position: _____

Telefon: _____


E-Mail: _____

Telefax: _____

Bitte mailen oder faxen Sie diese Seite, wir melden uns umgehend bei Ihnen:

Fragen + Wünsche: **01 / 890 31 00** oder **office@telecontact.at**

Der **Anschluss an die Schwestern-Rufanlage** erfolgt über einen zuvor gemäß Rufanlagen-
Informationsblatt konfigurierten Rufempfänger.

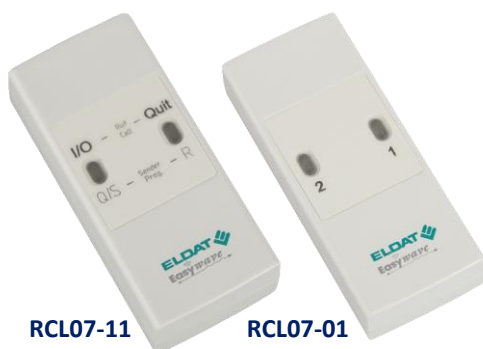

Der von uns seit Jahren in der Sturzprävention eingesetzte **Easywave® Rufempfänger** wurde zu Jahresbeginn speziell zum Einsatz in der Pflege mit Anschluss an Schwestern-Rufanlagen angepasst.

Vorteile des neuen RCL07-11:

Eingegangene Rufe werden direkt am Gerät angezeigt, die Rufsendung kann direkt am Gerät für 15 Minuten ausgeschaltet werden mit automatischer Einschaltfunktion nach Zeitablauf, es findet eine Batterie-Statusprüfung statt.

Der **Einzelbetrieb** der Sensormatten kann alternativ über einen **Easywave® Steckdosen-Funkgong** mit Quittierfunktion erfolgen. Wird die Sensormatte betreten, ertönt der aus drei Melodien ausgewählte Rufton. Die Rufmeldung wiederholt sich zyklisch bis eine Quittierung am Gerät erfolgt. Die drei Melodien stehen in Kombination mit dem integrierten Blitzlicht zur Verfügung.



* nicht zutreffendes streichen!